

细胞工厂 MIX60-CF






细胞工厂MIX60-CF

MIX60-CF采用优良的无限远光学系统，多模态成像：融合相差、明场等多种观察模式，搭配长工作距离物镜，清晰捕捉细胞贴壁生长、代谢产物分布等关键动态过程。可对高培养皿、圆筒状烧瓶、细胞工厂进行无沾染细胞培养观察。可广泛应用于科研院所、高等院校、医疗卫生、生物医药、检验检疫、农牧乳业等部门。



拍摄图

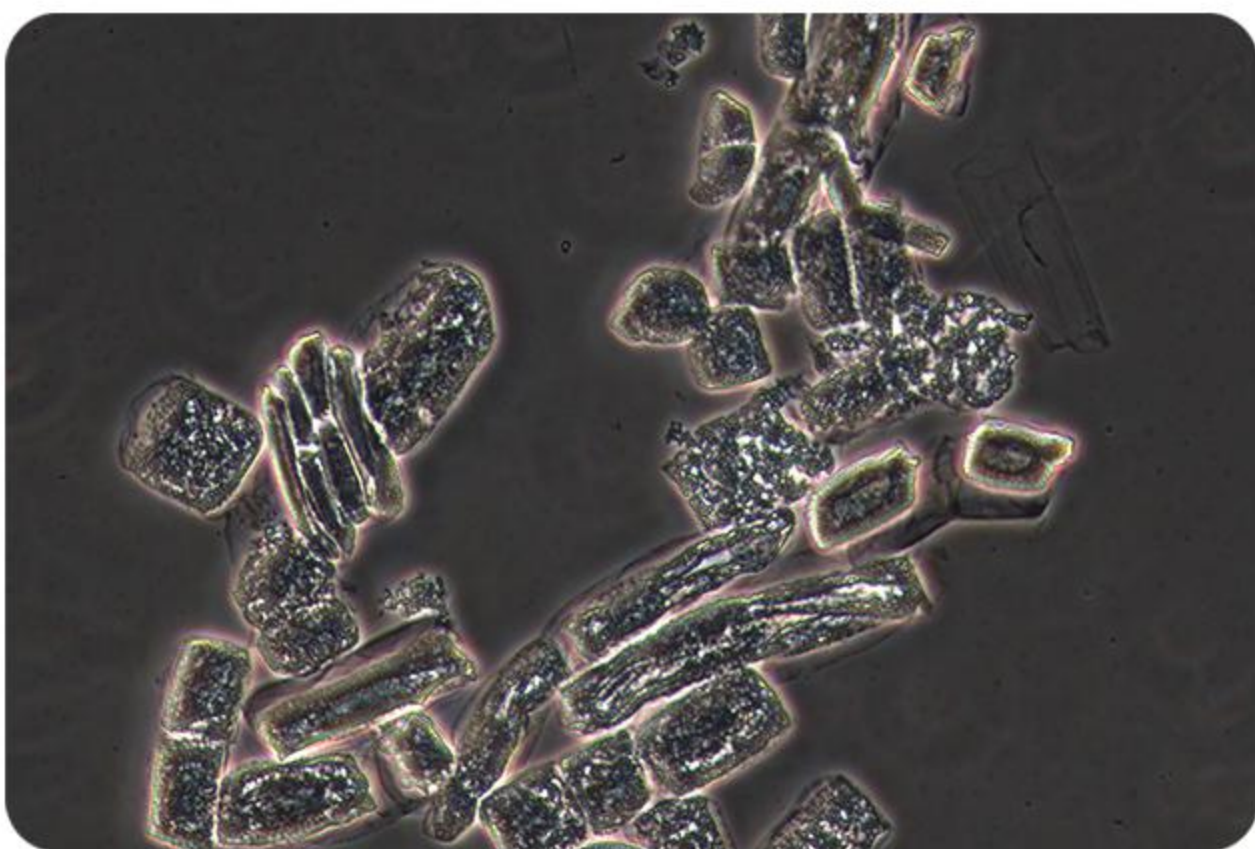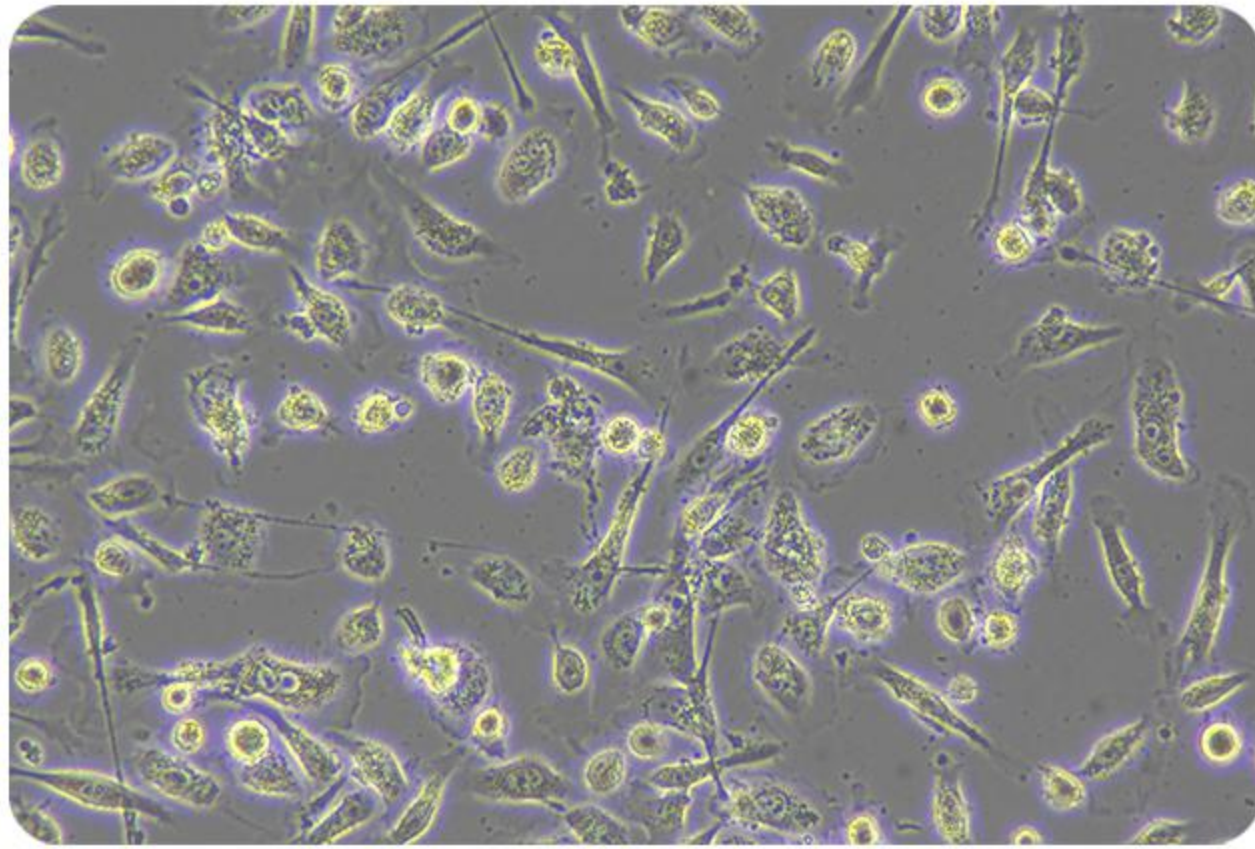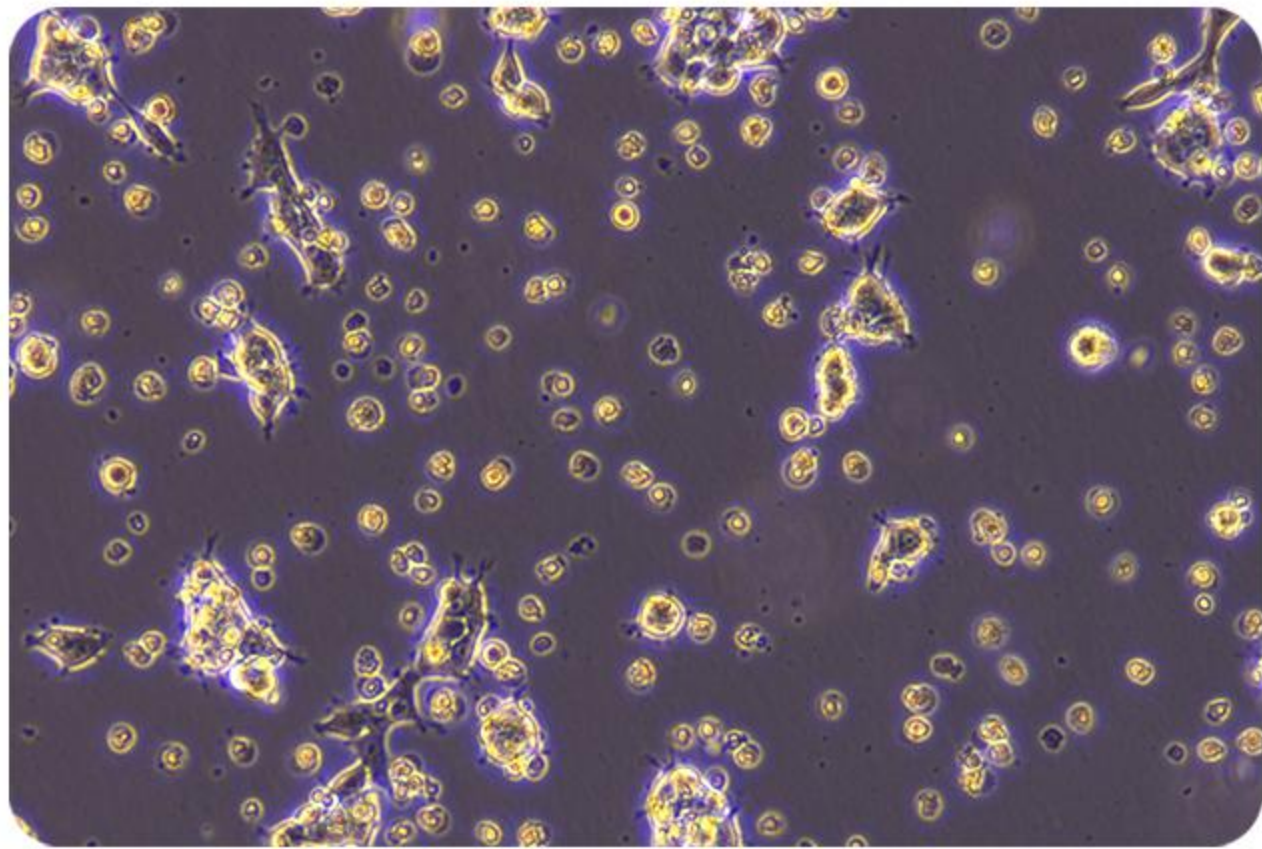

大视野目镜



可放10层细胞工厂



可升级拓展荧光

技术参数

细胞工厂MIX60-CF规格参数	
项目	规格
主机架	· 200mm无限远校正光学系统，机身可带ECO人走灯灭以及语音播报
目镜	· WF10X/22平场目镜，高眼点,屈光度可调，对中望远镜
目镜筒	· 固定式双目镜筒，倾角45度，瞳距50-70mm，光路：目镜/相机端口=100/0 :0/100
物镜转换器	· 五孔内定位转换器，滚珠轴承内定位，有防霉装置
物镜	· 长工作距离4X平场物镜(M) · 长工作距离10X平场相衬物镜（PH） · 长工作距离20X平场相衬物镜（PH） · 长工作距离40X平场相衬物镜（PH）
载物台	· XY金相载物台，金相水滴板
聚光镜	· 数值孔径NA：0.42，工作距离WD：55mm，适用物镜放大倍率4X，10X，20X、40X、60X
相差环板	· 10X相差环1个、20X/40X相差环共用1个
调焦机构	· 粗微调同轴，配有限位装置和锁紧装置，低手位同轴调焦手轮，微调手轮格值2 μ m
照明系统	· 3W全光谱白光LED，亮度连续可调，推拉板式相差聚光镜，工作行程55mm-400mm



广州市明美光电技术有限公司 Guangzhou Micro-shot Optical Technology Co.,Ltd.

公司地址: 广州市天河区华观路1933号万科云A栋506 / 电话: 020-38250606/38262481 / QQ: 505506350
网址: www.mshot.com / 邮箱: mshot@mshot.com / 服务热线: 400-880-1910



任何规格和外观的改变，恕不另行通知。

CY250310